

# Buhar Etkili El Dezenfeksiyon Standı



Bakteri ve virüslerin hızla yayılma olasılığı olan tüm ortak alanlarda TTAF Buhar Etkili El Dezenfektan Standı, herhangi bir temas gerektirmeden el dezenfeksiyonu sağlar.


Dezenfektan sıvısı özel bir teknolojiyle soğuk buhara dönüştürülerek deriye daha iyi nüfuz etmesi sağlanır.

Dezenfeksiyonun başlaması için cihaza yaklaşıp ellerinizi sokmanız yeterlidir.

- Kullanımı kolaydır: Yaklaşın, sizi algıladığı zaman yanan yeşil ışıkla aydınlanmış dezenfeksiyon hücresine ellerinizi sokun. Hücredeki ışık sarı olup uyarı sesi geldiğinde ellerinizi çıkartın.
- Dezenfektan 15 saniye içerisinde ellerin her noktasına yoğun soğuk buhar halinde ulaşır.
- 600-1000ml/saatlik buhar üretim kapasitesi bulunmaktadır. (Sürekli çalışma durumunda)
- 15 litrelik depoya sahip olan el dezenfeksiyon standı, düşük miktarda sıvı tüketimi yapmaktadır.
- Dolu bir depo ile 4000-4500 defa kullanılabilir.
- Ultra sessizdir. <30dB(A) gürültü seviyesi ile sessizlik gerektiren ortamlarda kullanılabilir.
- Modern ve şık tasarımı ile kullanıldığı ortama uyum sağlar.
- Dezenfeksiyon hücresindeki ışıklandırma, kullanıcı ve işletmeciyi bilgilendirir.
- Kullanım Alanları: Hastaneler, okullar, ofisler, alışveriş merkezleri, oteller ve ibadethaneler başta olmak üzere halka açık her yerde kullanılır.



# Buhar Etkili El Dezenfeksiyon Standı

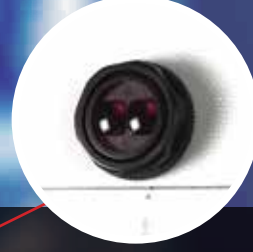

Algılama Sensörü

EL STERİLİZASYON  
STANDI

## Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: T-BHR-01
Çalışma Voltajı	: 220VAC 50Hz
Güç Tüketimi	: 48W
Maksimum Buhar Çıkışı	: 600-1000ml/s
Sterilizasyon Süresi	: 15sn
Algılama Mesafesi	: 50cm
Ölçüler	: 515mm*350mm*1580mm
Depo Kapasitesi	: 15L
Ağırlık	: 23000g

"Bu değerler referans sıvısına göre belirlenmiştir.  
Kullanılan dezenfektan sıvısına göre değişiklik  
gösterebilir."